

# Система Салфеток Тристел Трио

# Tristel

## Инновация в дезинфекции высокого уровня!

Система Салфеток Тристел предлагает **уникальный** и **безопасный** метод дезинфекции высокого уровня всего за **30 секунд**.



Система включает три стадии обработки медицинского оборудования в соответствии с нормативными указаниями

1. Моющие Салфетки для стадии предварительной очистки  
**Pre-Clean Wipes**
2. Спороцидные Салфетки для стадии ДВУ  
**Sporidical Wipes**
3. Ополаскивающие Салфетки для стадии ополаскивания  
**Rinse Wipes**

К Системе Тристел Трио прилагается Книга Контроля для учета всех этапов обработки.

Система Тристел Трио используется многими специалистами во всем мире и включена в профессиональные рекомендации международных организаций:

- Ассоциация Оториноларингологов Великобритании (British Association of Otorhinolaryngology)
- Общество Оториноларингологов Италии (Società Italiana di Otorinolaringologia)
- Общество Эхокардиологии Великобритании (British Society of Echocardiography)
- Ассоциация УЗИ Австралии (Australian Sonographers Association)

Эффективность Системы Тристел Трио подтверждена независимыми клиническими исследованиями, проведенными в Великобритании, Италии и Новой Зеландии, и соответствует Европейским Стандартам качества (European Medical Device Directive 93/42/EEC; EN14885). Система Салфеток Тристел Трио зарегистрирована в России с 2010 года.

### Область применения

- назоскопы и ларингофарингоскопы
- трансэзофагальные зонды
- трансвагинальные и ректальные датчики
- манометрические зонды
- офтальмологического оборудования
- и другие малые и средние инструменты, требующие ДВУ



назоскоп

трансэзофагальный  
зонд

трансвагинальный датчик  
УЗИ

### Отличная совместимость с медицинским оборудованием:

**Эндоскопы:** Atmos • Karl Storz • Vision Sciences • Xion Medical • Endoscopy Development Company

**Зонды УЗИ:** Acuson • BK Medical • GE Healthcare • Hitachi • Philips • Siemens • SonoSite • Toshiba

**Катетеры:** Gaeltec Medical • Given Imaging • MMS • Sandhill Scientific • Unisensor UniTip Catheters

# Система Салфеток Тристел Трио

В России Система Салфеток Тристел уже завоевала признание врачей оториноларингологов. В современных условиях оснащение ЛОР кабинета подразумевает наличие эндоскопического оборудования. Перед специалистами встает вопрос эффективной, безопасной, а главное быстрой обработки эндоскопа. Традиционная ДВУ методом погружения существенно замедляет интенсивность приемов, а сам инструмент находится в длительном контакте с агрессивной средой дезинфектанта.


Система Салфеток Тристел Трио предназначена для быстрой дезинфекции высокого уровня гибкого и жесткого бесканального эндоскопического оборудования. Простота и удобство в применении позволяют Вам обработать инструмент в любых условиях.

## Стадия Предварительной Очистки



**Моющие Салфетки Тристел** пропитаны малопеняющимся раствором ПАВ, который в сочетании с тройными ферментами создает крайне низкое поверхностное натяжение для быстрого и эффективного удаления органических веществ и загрязнений с поверхности инструмента перед дезинфекцией высокого уровня.

## Стадия ДВУ

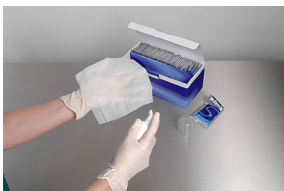

**Спороцидные Салфетки Тристел** предназначены для быстрой и безопасной дезинфекции высокого уровня.

- Спороцидная эффективность за **30 секунд**
- Действующее вещество – диоксид хлора. Обладает антимикробной и спороцидной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекций, кишечных инфекций), вирусов (включая аденовирусы; вирусы гриппа, парагриппа, птичьего, свиного гриппа и другие типы вируса гриппа; возбудителей острых респираторных инфекций; энтеровирусы; ротавирусы; вирус полиомиелита; вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, а также возбудителей анаэробных инфекций
- **ЕДИНСТВЕННЫЕ В МИРЕ СПОРОЦИДНЫЕ САЛФЕТКИ**

## Стадия Ополаскивания



**Ополаскивающие Салфетки Тристел** в стерильной упаковке пропитаны деионизированной водой и предназначены для ополаскивания поверхности, обработанной химическими дезинфицирующими средствами.

**Также в ассортименте Тристел:**

## Автоматическая Машина Стелла для обработки одноканального оборудования

- Для дезинфекции высокого уровня гибких и жестких эндоскопов с блоком автоматической промывки канала Пульс
- Спороцидная эффективность за 5 минут
- «Тристел Фьюз для Инструментов» - расходное средство на основе диоксида хлора для работы автоматической машины Стелла

